

Menicon
BLOOM
DAYTM

ZACHTE DAGLENZEN VOOR MYOPIECONTROLE

PRODUCTBROCHURE & AANPASADVIES

 Menicon



MAGIE VOOR KINDEREN,
WETENSCHAP VOOR
VOLWASSENEN




Menicon BLOOM™ DAY

Menicon Bloom Day is een daglens met center-distance extended depth of focus. De daglenzen zijn CE-goedgekeurd en specifiek bedoeld voor het beheersen van de voortgang van bijziendheid.



DESIGN


Extended depth of focus design met een snelle en vloeiende overgang in plussterkte van het centrale gedeelte tot in de periferie waarin de additie tot wel +8,00 dpt kan oplopen.

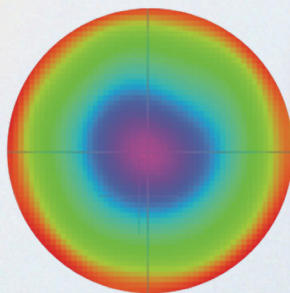

SPECIFICATIES


- Type: Zachte daglenzen
- Radius: 8,30 mm
- Sterkte: -0,25 dpt t/m -10,00 dpt
- Diameter: 14,50 mm
- Materiaal: Etafilcon A
- Watergehalte: 58%
- Blauwe tint
- UV filter: Ja
- Draagtijd: Minimaal 10 uur per dag, 6 dagen per week

+8,00 dpt sterkte bij 6 mm diameter

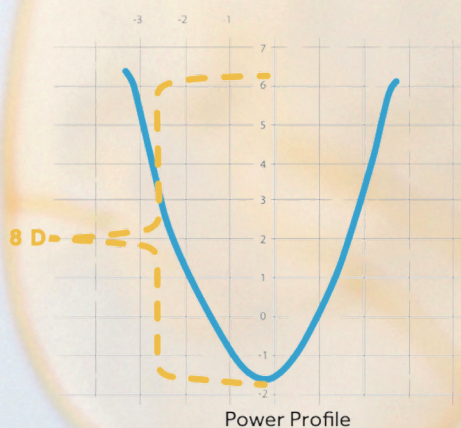




EFFICACY

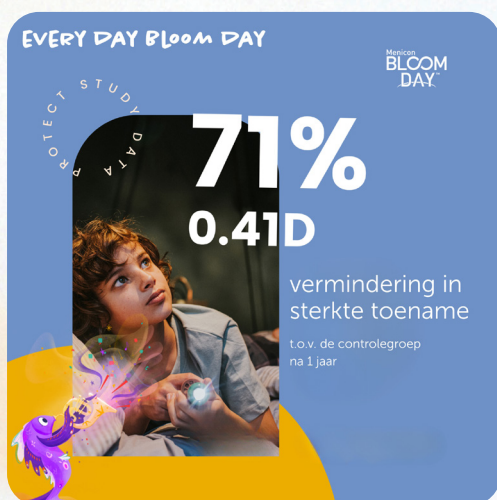

REFRACTIVE ERROR



Gebruik de best gecorrigeerde
refractie met de volledige

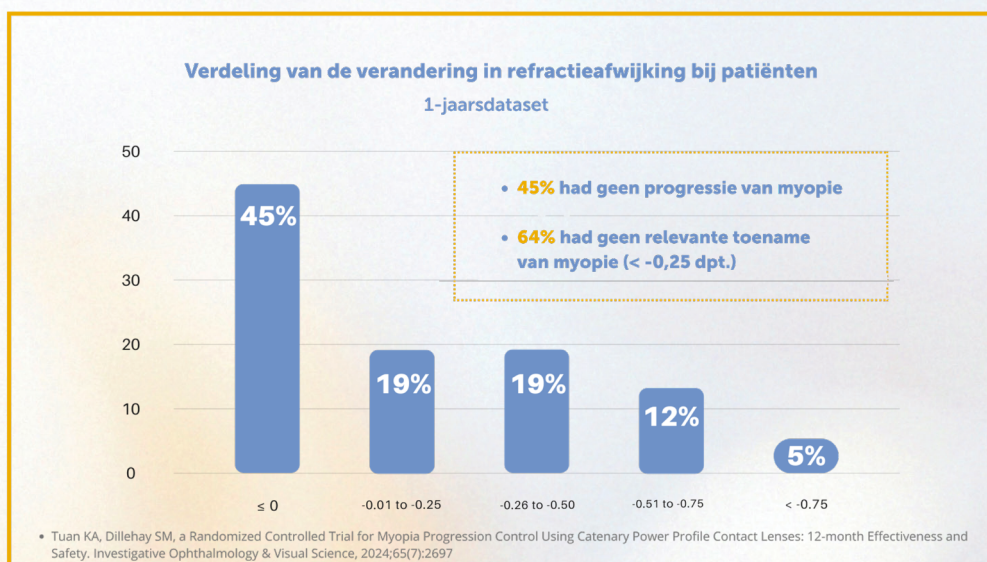

Op basis van de zesjaarsgegevens die in 2022 zijn gepubliceerd in Clinical Ophthalmology en de resultaten van drie onafhankelijke studies^(2,4), blijkt uit de gegevens over één jaar¹⁾, dat Menicon Bloom Day effectief de ooggroei en verandering in refractieve fouten bij kinderen kan beheersen, in uiteenlopende klinische omgevingen en populaties.

1. Tuan KA, Dillehay SM, a Randomized Controlled Trial for Myopia Progression Control Using Catenary Power Profile Contact Lenses: 12-month Effectiveness and Safety. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2024;65(7):2697.
2. Cooper J, Aller T, Smith EL 3rd, Chan K, Dillehay SM, O'Connor B. Retrospective Analysis of a Clinical Algorithm for Managing Childhood Myopia Progression. Optom Vis Sci. 2023 Jan 1;100(1):117-124.
3. Cooper J, O'Connor B, Aller T, Dillehay SM, Weibel K, Benoit D. Reduction of Myopic Progression Using a Multifocal Soft Contact Lens: A Retrospective Cohort Study. Clin Ophthalmol. 2022 Jul 4;16:2145-2155.
4. Lederman, CR. Myopia Control With Extended Depth of Focus Multifocal Contact Lenses. In: American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus; 2023 Mar 29; New York, USA.

AANPASREGELS

Starten met Menicon Bloom Day

Bezoek 1: Eerste onderzoek

Bezoek 2: Afleveren van lenzen

Bezoek 3: Controle na 1 week

Bezoek 4: Kwartaalcontrole

EERSTE ONDERZOEK

Bij het eerste onderzoek worden de anamnese, tests en metingen uitgevoerd die nodig zijn om de juiste contactlens te bepalen.

INITIËLE METING

1. Refractie

Gebruik de best gecorrigeerde brilrefractie met de volledige cilindercomponent.

Gebruik je Easyfit voor de aanmeting?

- Vul dan de sterkte in. Easyfit berekent vervolgens automatisch de juiste lens

Bestel je via de website?


- Ga dan door naar stap 2.

2. Binoculair DuoChrome-test

Gebruik de rood-groen DuoChrome-test om binoculair te controleren of de klant niet te veel plussterkte heeft. Vergeet niet het licht uit te doen en beide ogen open te laten. Eindig de test met een lichte voorkeur voor **groen**.

3. Sferisch equivalent

Neem hiervan het sferische equivalent (de sferische waarde + de helft van de cilinder).

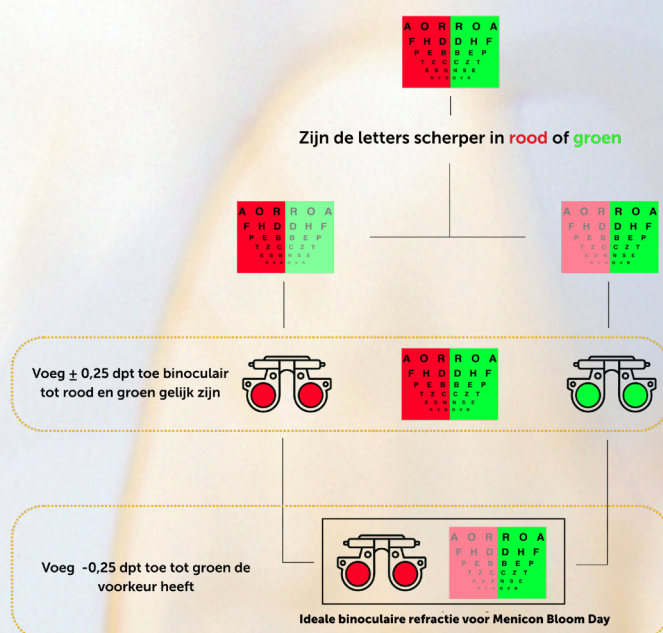



AANPASREGELS

AFLEVEREN LENZEN

Zodra de lenzen bij de oogzorgspecialist zijn binnengekomen, kan de klant langskomen om ze op te halen en instructies te ontvangen over het juiste gebruik en de omgang met de lenzen.

LENSPASSING

- 1. Laat de lens minstens 10 minuten op het oog stabiliseren.** Het brein past zich aan aan het ontwerp van de lens.
 - Het zicht in de verte wordt al beter en acceptabel.
 - Doe geen overrefractie op dit moment.
- 2. Evalueer de passing van de lens:** comfort, concentratie en beweging.
- 3. Lever de lenzen af.** De klant draagt één week lang dagelijks een nieuw paar daglenzen.

CONTROLE NA 1 WEEK

De controle na de eerste week is belangrijk. Dan kunnen de lenzen goed worden beoordeeld op passing en visus.



GEZICHTSSCHERPTE

Controleer binoculair zicht.

- **Voer geen overrefractie uit.**
- Indien nodig, pak een nieuwe paslens in een aangepaste sterkte.
- **Als het zicht niet scherp is, verhoog dan de sterkte met -0,25 dpt in het dominante oog**(sensorische dominantie). Als het zicht verbetert, behoud dan deze extra -0,25 dpt.
- Als het zicht verbetert maar nog steeds niet optimaal is, **verhoog dan ook -0,25 dpt in het niet-dominante oog.**

TIPS

- Geef niet te veel plussterkte
- Meet niet over de lenzen heen. Indien nodig maak gebruik van een nieuwe paslens
- Plan direct de vervolgafspraken in zodat dit niet kan worden vergeten (elke 3 maanden)

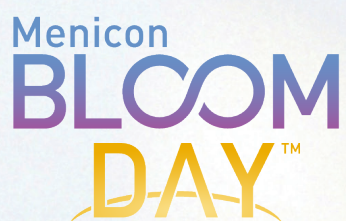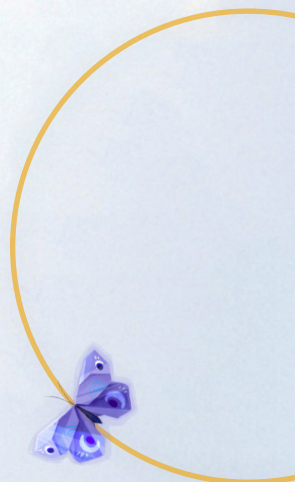

**MAGIE VOOR KINDEREN,
WETENSCHAP VOOR
VOLWASSENEN**

Menicon
BLOOM
DAYTM

www.meniconbloom.nl

